




ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – БГ
IN 26359 Компресионен масажор за колена inSPORTline
Mishair

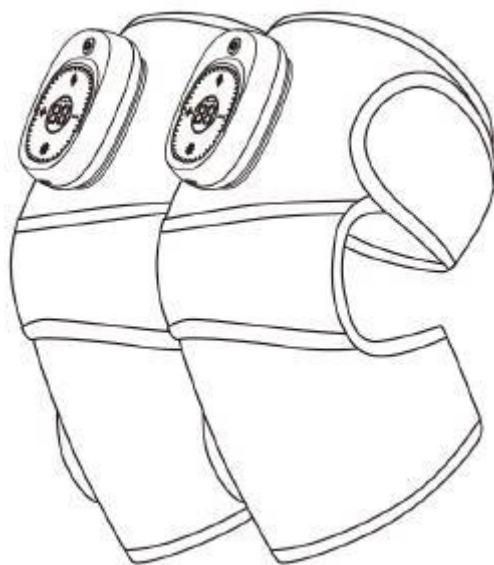

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	4
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ.....	4
УПОТРЕБА.....	4
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	6

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашия уебсайт www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ

- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами. В случай на повреда се свържете с отдела за рекламации.
- Преди употреба трябва да заредите контролера.
- Не го оставяйте без надзор в близост до деца или лица с намалени умствени способности.
- Лица с ограничени двигателни или умствени способности могат да използват продукта само под наблюдението на възрастен и отговорен човек.
- Използвайте само в безопасна среда.
- Не съхранявайте на места, достъпни за деца.
- Не използвайте, ако страдате от възпаления, имате подути крака или увредена кожа (отворени рани, пукнатини, разширени вени и др.).
- Не използвайте във вода (вана, душ кабина и др.).
- Дръжте далеч от вода. Не потапяйте във вода или други течности.
- Не използвайте пирони или други метални предмети за закрепване.
- Поддържайте продукта сух.
- Не използвайте в влажна среда.
- Не използвайте в помещения, където има аерозоли или висока концентрация на кислород.
- При първата употреба използвайте ниска интензивност.
- Използвайте продукта в седнало или легнало положение.
- Не поставяйте чужди предмети в маркучите.
- Само за домашна употреба.
- Не носете дрехи, които могат да повредят продукта (дрехи, които съдържат метални елементи или остри ръбове).
- Ако се появят нежелани реакции (зачервяване или раздразнение на кожата, обрив, сърбеж и др.), незабавно преустановете употребата и се свържете с лекар.
- Преди всяка употреба проверете състоянието и функционалността на продукта.
- Устройството не замества медицинската помощ. Ако почувствате болка или неразположение, незабавно преустановете употребата на устройството и се свържете с лекар. Ако не сте сигурни, винаги се консултирайте с лекар преди употреба на устройството.
- Ако някога сте страдали от следните заболявания, консултирайте се с лекар преди употреба: тумори, сърдечни заболявания, лоша преценка на температурата, загуба на съзнание, отворена рана на мястото на прилагане, треска (поради възпаления, промяна в кръвното налягане и др.).

Не използвайте, ако:

- По време на бременност или след раждане.
- Лица, които използват кардиостимулатор или друг медицински имплант.
- Лица, страдащи от сърдечни заболявания или заболявания на съдовете.
- Лица, страдащи от анормално кръвно налягане.

- Лица, страдащи от остеопороза, увреждане на гръбначния стълб, увреждане на мускулите или други остри заболявания.
- Лица, страдащи от тумори.
- Лица след операция.
- Лица с чувствителна кожа или с заболявания на кръвообращението.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Масажор за колене
Модел	TD01-FM-073
Стандарти	GB4706.1-2005 / GB 4706.10-2008
Размери	Контролер: 60x86x22 мм
	Продукт: 500x310x5 мм
	Дължина на кабела за зареждане: 1 м
Тегло	205 гр
Таймер	15 мин. работа
Материал	Основна част: полиестер, найлон, чимлон
	Контролер: ABS смола
Напрежение	5V
Мощност	10W
Зареждане	DC5V/500~200 mA USB тип C към USB
Капацитет на батерията	250 mAh
Зареждане	1 ~ 2 часа
Непрекъснат режим на работа	60 – 120 мин
Произведено в:	Китай

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ


- Почиствайте контролера само с мека суха кърпа.
- Почистете текстилните части с разтвор от вода и алкохол или с препарат за почистване на текстил. След почистване винаги подсушете продукта с кърпа. Не използвайте разтворители или почистващи препарати на бензинова основа.
- Никога не почиствайте електрическите части с вода.
- Съхранявайте продукта на сухо и сенчесто място, при ниска влажност и го предпазвайте от прах.
- Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка.
- Дръжте го далеч от деца.
- Преди съхранение, подредете правилно зарядния кабел.

УПОТРЕБА

Зареждане и батерия

- Преди употреба се уверете, че сте заредили контролера.

- Индикаторът за зареждане на батерията ще мига по време на зареждането. Когато индикаторът свети , батерията е заредена.
- Ако нивото на батерията е ниско, индикаторът ще мига.
- Времето за зареждане на батерията е 1 – 2 часа, а времето за работа с едно зареждане е 60 ~120 минути. Времето за работа може да варира в зависимост от околната температура и интензивността на масажа.
- Ако използвате продукта за по-дълго време, е необходимо да го заредите. Зареждайте продукта редовно на всеки 3 месеца.
- Не използвайте по време на зареждане.
- За зареждане можете да използвате всеки USB адаптер (5V, 500mA – 2000 mA).

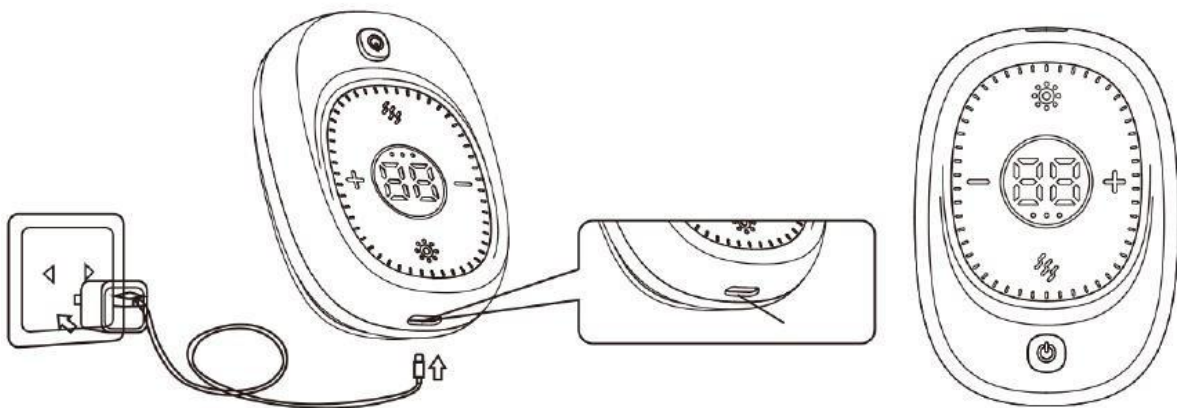


Управление

Закрепете според илюстрацията




Задръжте бутона за включване . Устройството ще се включи, индикаторите ще светнат и ще се чуе звуков сигнал. (Ако не може да се включи, устройството трябва да се зареди.)

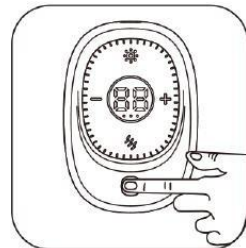


Натиснете бутона за нагряване , за да стартирате нагряването, и използвайте бутоните + и –, за да регулирате температурата. Когато достигнете горната граница, ще чуете звуков сигнал. Дисплеят ще покаже текущата температура на нагряване.


5 режима на нагряване: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 00°C (изключено)

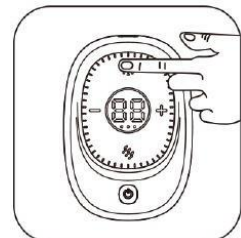


Натискането на бутона за вибрации  стартира промяната на вибрациите, а с помощта на бутоните + и – можете да регулирате типа на вибрациите. Дисплеят показва текущия режим на вибрациите: 01, 02, 03, 00 (изключено)

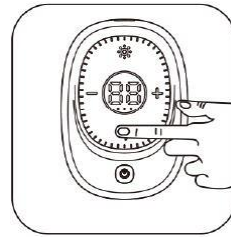


За да настроите таймера, натиснете бутона за включване. Първоначалната стойност е 15 минути. Натискането на бутона увеличава стойността с 5 минути до максимум 30 минути, минималното време на работа е 5 минути. Ако по време на настройката превишите стойността 30 минути, таймерът ще започне да отброява от най-ниската стойност. Таймерът е заключен за 10 секунди след стартиране. За да отключите контролера, натиснете бутона за включване.

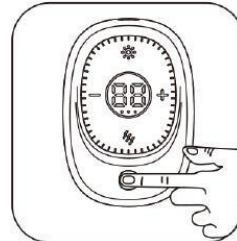

За да изключите, задръжте бутона за включване/изключване  за 2 секунди.

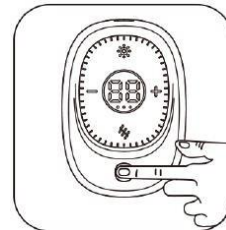

Възможни приложения

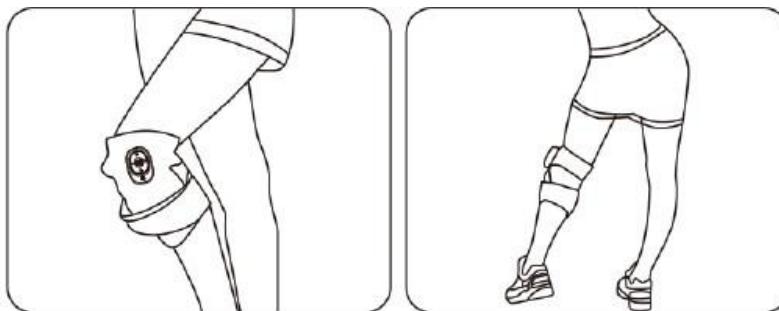

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтиране е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител. „Покупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в

рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.¹⁴

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg