




ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – БГ
IN 30014 Компресиращи масажирски ботуши inSPORTline
Complex

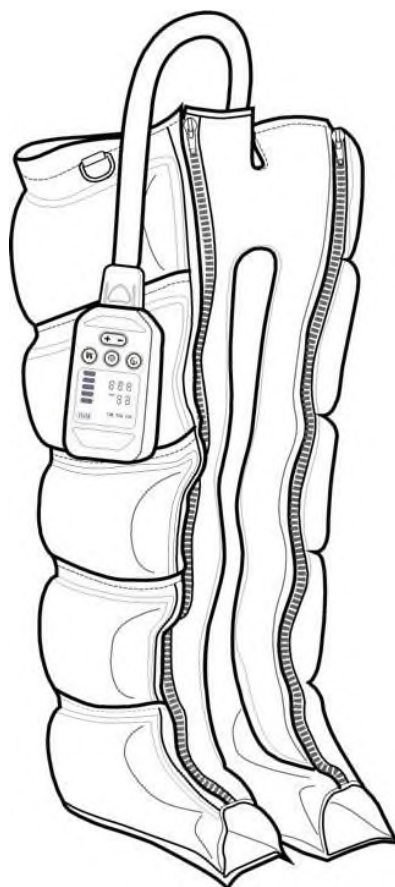



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА	4
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА.....	4
УПОТРЕБА.....	4
СЪЕДИНЕНИЕ НА КОМПРЕСОРНА ЕДИНИЦА	5
УПРАВЛЕНИЕ.....	6
ВИДОВЕ МАСАЖИ.....	7
ПОЧИСТВАНЕ.....	7
СЪХРАНЕНИЕ.....	7
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.....	8
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	8


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете наръчника и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Дълготрайното непрекъснато използване може да доведе до мускулни болки. Регулирайте продължителността и интензивността на употреба според реакцията на тялото ви.
- Предпазвайте от удари, падания, разкъсвания и подобни повреди. Дръжте далеч от огън, източници на топлина и пламъци.
- Предпазвайте от вода и влага. Съхранявайте на сухо, сенчесто и чисто място. Не съхранявайте в близост до източници на топлина или химикали.
- По време на употреба не стойте и не извършвайте други физически натоварващи дейности.
- Зареждайте само с подходящ кабел и адаптер.
- Не зареждайте без надзор. Зареждайте само извън обсега на запалими или взривоопасни вещества.
- Не покривайте крачолите по време на употреба.
- Продуктът не е подходящ за бременни жени или лица, приемащи лекарства, които могат да повлияят на налягането, чувствителността или преценката.
- Продуктът не е подходящ за хора, страдащи от: хипертония, остеопения, остеопороза, диабет, разширени вени, лоша чувствителност на кожата, чувствителност към налягане, с неотдавнашна травма или операция, сколиоза или деформация на гръбначния стълб, хора със сърдечно заболяване или високо налягане.
- Консултирайте се с лекар преди употреба, особено ако страдате от следните здравословни усложнения или попадате в някоя от изброените категории: кожна обриви, отворени рани, мехури, локално възпаление на тъканите, синини; дълбока венозна тромбоза, остеомиелит; фрактура или миозит; високо кръвно налягане; остро или тежко сърдечно, чернодробно или бъбречно заболяване; неврологични състояния, водещи до загуба или промяна на чувствителността; нарушения на кръвосъсирването; скорошна операция или травма на мястото на прилагане; нарушения на съединителната тъкан; хронична венозна недостатъчност; тежка сколиоза или деформация на гръбначния стълб; използвате кардиостимулатор, ICD или сте претърпели инфаркт; използвате лекарства, които разреждат кръвта или променят чувствителността; страдате от алергия към материала на продукта (найлон); бременност или кърмене; нечувствителност; рак или тумори; епилепсия; кардиопатия
- Не използвайте продукта върху лицето, шията и гениталиите.
- Ако почувствате болка или дискомфорт, незабавно преустановете употребата.
- Не използвайте по време на зареждане.
- Зареждайте редовно веднъж на два месеца, ако устройството не се използва.
- Не перете в автоматична пералня.
- Устройството не е играчка. Дръжте го далеч от деца и домашни любимци.
- Зареждайте компресорната единица под наблюдение и далеч от запалими или взривоопасни вещества.
- Зареждайте компресорната единица само с помощта на предоставения заряден уред.
- Не хвърляйте батерията в огън и не я оставяйте в близост до източници на топлина.
- Не хвърляйте батерията във вода и я предпазвайте от влага.
- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами.
- Ако от батерията излиза миризма или течност, незабавно прекратете експлоатацията.
- Не използвайте устройството в зони с висока влажност и температура.
- Подходящ само за домашна употреба, не замества здравните или медицинските грижи.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

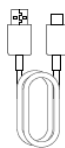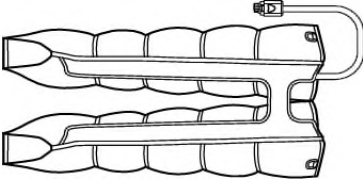				
Заряден кабел	Компресионна устройство	Компресионни панталони	Преносима чанта	Ръководство


РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

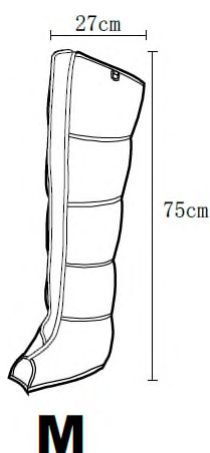

Подходящ за височина 155-170 cm

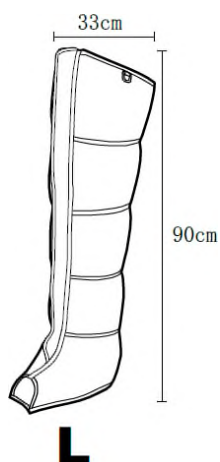

Подходящ за височина 170-185 cm

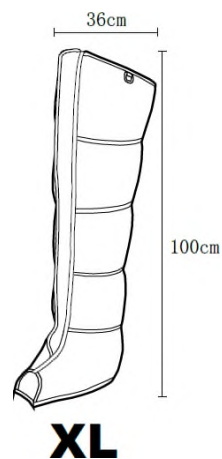


Подходяща за височина > 180 cm


УПОТРЕБА

По време на употреба препоръчваме да носите къси панталони или тънки панталони. Седнете удобно или легнете. Краката трябва да са на едно ниво с талията. Разкопчайте компресионните панталони и поставете краката си поотделно в крачолите. Краката трябва да са в средата на компресионните панталони.

По време на употреба компресионните панталони не трябва да са сгънати. Не използвайте устройството в изправено положение или

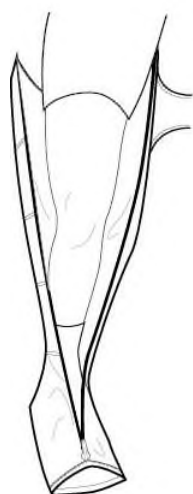


по време на ходене.

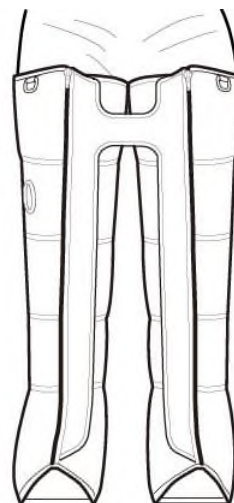


СВЪРЗВАНЕ НА КОМПРЕСИОННИЯ АПАРАТ

Свържете надуваемата тръба към изхода за въздух на компресорната единица. Уверете се, че конекторът е правилно закрепен. Ще чуете щракване.

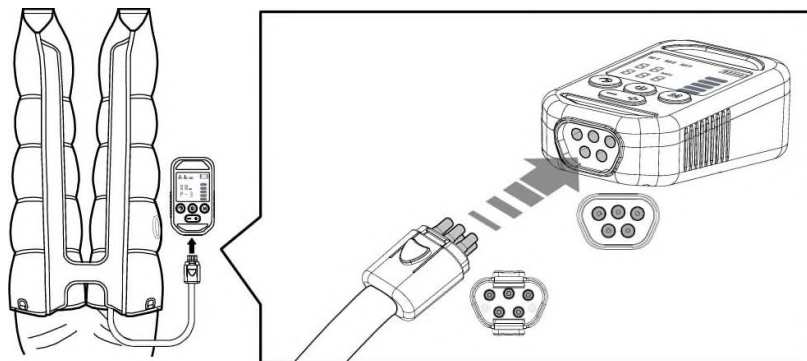


С помощта на магнит можете да закрепите компресионния апарат към крачолата.


Предупреждение: Не поставяйте ръце, пръсти или други предмети между магнитите, тъй като съществува риск от прищипване.

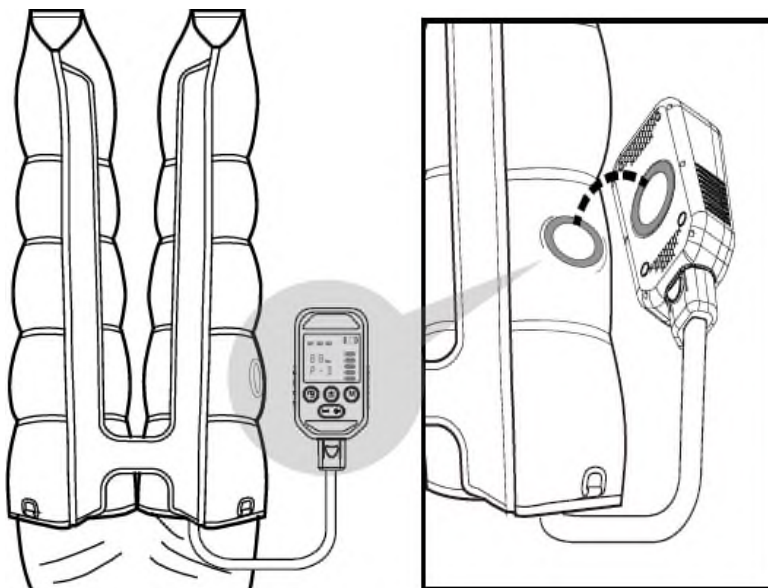


Преди да стартирате, се уверете, че крачолите са затворени и закрепени. Не използвайте, ако ципът е отворен. За да стартирате, натиснете бутона на превключвателя за 1 секунда.

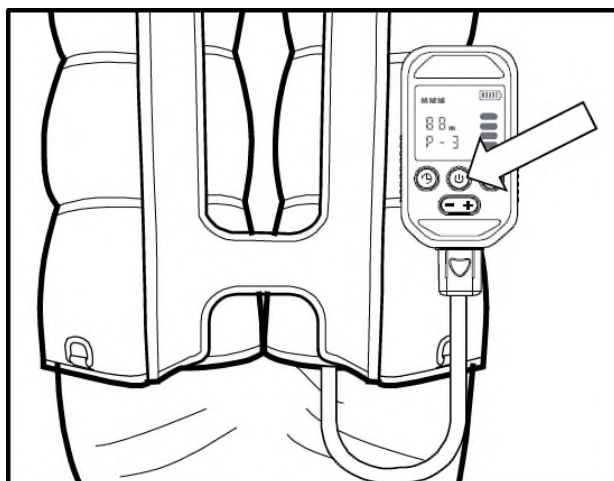

За да махнете компресионната единица, натиснете бутоните от двете страни на конектора.

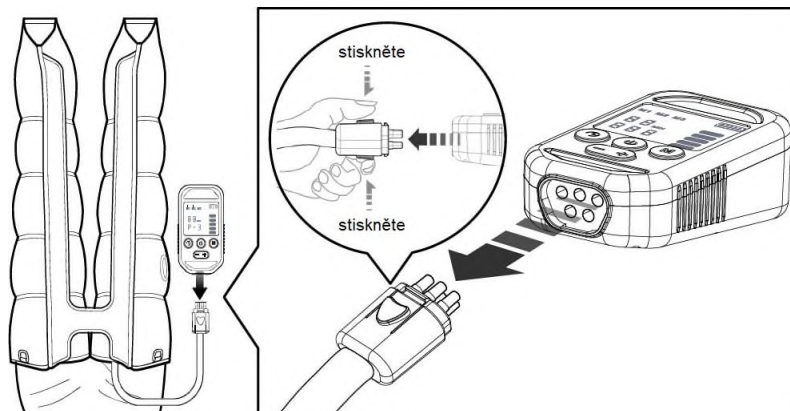

УПРАВЛЕНИЕ

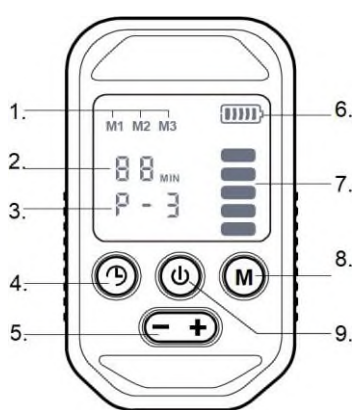

1. Текущ режим

2. Таймер

3. Интензивност

4. Бутон на таймера

5. Бутон за интензивност

6. Състояние на батерията

7. Текуща позиция на компресията на крачолите

8. Бутон за режим


9. Бутон за изключване

Индикаторът на батерията показва 5 сегмента на състоянието на зареждане на батерията. Ако индикаторът мига, батерията е изтощена. Компресорната единица не може да се използва по време на зареждане.

Функции на бутоните

Превключватели		Задръжте, за да включите/изключите компресорната единица
Таймер		Натиснете, за да настроите таймера на 10, 20, 30 минути.
Режим		Натиснете, за да промените режима на M1, M2, M3. Задръжте, за да превключите в ръчен режим, след което можете да настроите позицията на компресията с натискане на бутона.
Интензивност		Натиснете, за да регулирате интензивността P1 – P6. Натиснете „“, за да намалите интензивността, и „“, за да я увеличите.

ТИПОВЕ МАСАЖИ

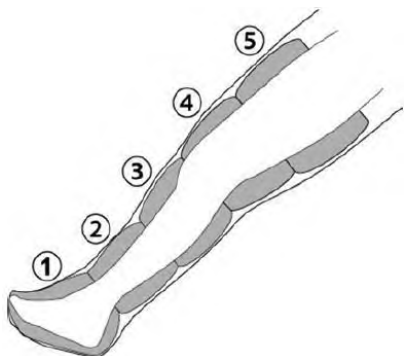

1. Последователен масаж: масажът се извършва последователно от 1 до 5 камери
2. Цикличен масаж: цикличен масаж на зададените камери
3. Масаж на дадена точка: настройка на масажа на дадена камера. Задръжте бутона М и след това натиснете, за да изберете камера.

РЪЧЕН РЕЖИМ

Задръжте бутона М, ще чуете звуков сигнал.

В ръчен режим можете да изберете масаж с конкретна камера 1 – 5 или да активирате всички камери, като натиснете М.

Натискайки бутоните „■“, намалявате интензивността, а с натискане на бутоните „+“ я увеличавате. Р1 – Р6

С помощта на бутона за таймера можете да настроите продължителността на цикъла на 10, 20, 30 минути.

В случай на повреда или аварийно изключване можете да изключите крачолите от компресионната единица.

ПОЧИСТВАНЕ

- Разстелете крачолите върху равна повърхност. За почистване използвайте дезинфектант на алкохолна основа (не използвайте средства на маслена основа). Не използвайте агресивни почистващи средства и разтворители.
- Външните части почистете с мека кърпа.
- Преди следващото използване трябва да изсушите крачолите добре.

Забележка: Не потапяйте панталоните във вода и не ги измивайте под течаща вода. Предпазвайте ги от въздействието на агресивни почистващи средства и разтворители.


СКЛАДИРАНЕ

Разстелете на равна и чиста повърхност и оставете крачолите да се издухат.

Сгънете десния крачол върху левия. Изравнете краищата.

Започнете да сгъвате панталоните от частта на стъпалата до една трета, а след това още веднъж. Не сгъвайте панталоните прекалено плътно, тъй като съществува риск от повреждане на маркучите и съединенията. Сгънете панталоните и ги съхранявайте в преносима чанта.

Преди съхранение се уверете, че крачолите са чисти и сухи. Съхранявайте на сухо и сенчесто място. Не оставайте на места с висока температура, надвишаваща 45 °С.

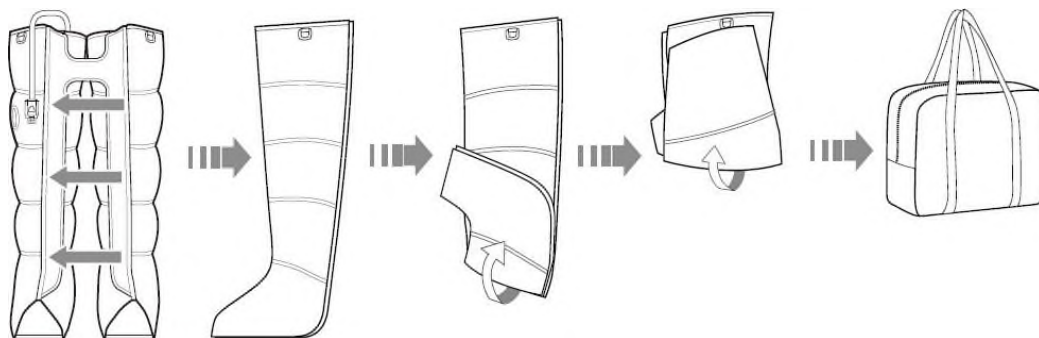

Често задавани въпроси

Не може да се стартира.

Проверете състоянието на батерията. Уверете се, че сте натиснали правилно бутона за включване.

Дисплеят не показва състоянието на зареждането по време на зареждане.

Уверете се, че конекторът е правилно свързан.

Внезапно изключване по време на употреба.

Проверете състоянието на батерията. Изключване поради защита от прегряване.

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ



E-1 – критично ниско ниво на батерията

Заредете батерията възможно най-скоро.



E-2 – изтичане на въздух

Проверете състоянието на въздушните маркучи, техните връзки и всички съединения.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтване е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Отнесете продукта до най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКАНИЯ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител. „Потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в

рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги.

Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.¹⁴

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е посочен сериен номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, рекламацията по гаранцията не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неправомерната рекламация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни рекламации, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменена стока е предадена на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg